

# Der bewährte **RECARO** Autositz jetzt mit innovativem HERO Sicherheitssystem



**9 - 36 kg**  
Körpergewicht



## Maße & Gewichte

## RECARO Sport HERO Reha

<b>Sitztiefe</b>		31 cm (26 cm mit Sitzpelotten)
<b>Sitzbreite</b>	vorne	31 cm (21 cm mit Sitzpelotten, 27 cm mit Sitzverkleinerer)
	hinten	29 cm (20 cm mit Sitzpelotten, 25 cm mit Sitzverkleinerer)
<b>Rückenhöhe (Sitz)</b>		53 - 73 cm
<b>Schulterhöhe (Kind)</b>		23 - 42 cm
<b>Gesamtmaße (B x H x T)</b>		54 x 55 (max. 81) x 52 cm
<b>Gewicht des Sitzes</b>		ca. 8 kg
<b>max. Belastbarkeit</b>		9 - 36 kg

HMV-Nr. 26.11.06.0020

**RECARO** & **Thomashilfen**  
Eine starke Partnerschaft

# Autositz **RECARO** Sport HERO Reha

- Innovatives HERO Sicherheitssystem für mehr Schutz und höheren Komfort
- Leichtes Hineinsetzen der Kinder durch Drehadapter
- Pelotten-System als Grundausrüstung
- 5-Punkt-Sicherheitsgurt für ECE-Gruppe I
- 5-Punkt-Positionierungsgurt optional für ECE Gruppe II - III
- Zugelassen nach ECE R 44/04 Gruppe I - III, zusätzliche DEKRA Prüfung der Reha-Version



## Funktionen



Advanced Side Protection (ASP): Seitliche Energieabsorber reduzieren Kräfte eines Seitenaufpralls



Kopfstütze 4-fach höhenverstellbar




Ruheposition (+ 5°) einfach und schnell einstellbar (nur für Kinder der ECE-Gruppe I)




Praktischer Tragegriff

## Zubehör

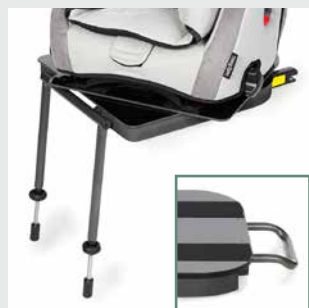


Drehplatte mit Seatfix-Adapter und Stützfuß (Detail: Stabilisierungsbügel)

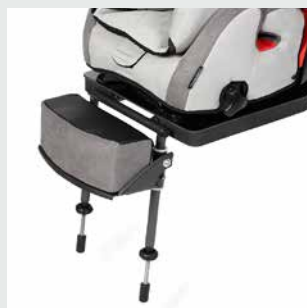


Fußstütze (inkl. abnehmbarem Erhöhungsblock) mit Adapter



Sitzkeil, unten (+ 10°), Sitzneigung max. + 15° mit zusätzlicher Einstellung der Ruheposition

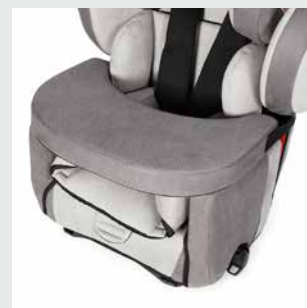

Therapietisch

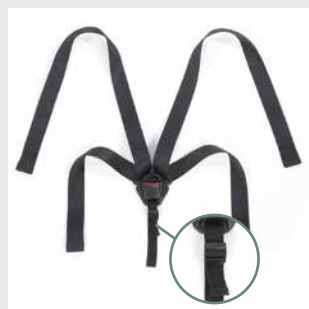

Gurtverlängerung (+ 20cm) inkl. Schrittgurt



Gurtschildpolster (groß)

## Produkt & Zubehör

Produkt & Zubehör	Art.-Nr.
<b>RECARO Sport HERO Reha</b>	<b>880</b>
Fußstütze, kurz (12 cm)* (inkl. Erhöhungsblock)	806.1
Adapter für Fußstütze*	821
Drehplatte mit Fußstützen-Adapter**	820
<b>Optionales Drehplatten-Zubehör für besonders viel Stabilität:</b>	
▪ Seatfix-Adapter*** (für Drehplatte)	818
▪ Stabilisierungsbügel, hinten*** (für Drehplatte)	819
▪ Stützfuß, vorne (für Drehplatte)	817
Sitzkeil, unten** (+ 10°)	810
Therapietisch	885
Gurtverlängerung (+ 20 cm) inkl. Schrittgurt	824
Gurtschildpolster (groß)	E91035
Autositz-Schutz	813
Autositz-Schutz mit Rücken	814

\* Bei Verwendung der Fußstütze muss immer der Adapter mitbestellt werden.

\*\* Drehplatte kann nicht gleichzeitig mit dem Sitzkeil (unten) eingesetzt werden.

\*\*\* Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel (hinten) können nicht gleichzeitig genutzt werden.

### ACHTUNG:

Beim Befestigen des RECARO Sport HERO Reha Sitzes mit dem fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurt (nur ECE-Gruppe I: 9 bis 18 kg) kann die Drehplatte nicht genutzt werden.