

Heilpädagogische Kindertagesstätte
Hauptstraße 63
27446 Selsingen
Tel.: 04284/ 9300460
Fax: 04284/ 930045

Gutachten zum Nachweis des medizinischen Nutzens

Getestet: Therapiestuhl Hip Hop 100

Getestet von: Lebenshilfe Bremervörde/Zeven gemeinnützige GmbH
Heilpädagogische Kindertagesstätte
Hauptstraße 63
27446 Selsingen

Testdauer und Durchführung:

Der Therapiestuhl Hip Hop 100 wurde in unserer Einrichtung von den Therapeuten und Erzieherinnen in der alltäglichen Handhabung über mehrere Wochen getestet.

Die Lebenshilfe in Selsingen bietet mit einer heilpädagogischen Kindertagesstätte, der Helga-Leinung-Schule (staatl. anerk. Tagesbildungsstätte) und der Frühfördereinrichtung ein umfassendes Angebot zur Förderung, Beschulung und Unterstützung für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedroht sind und deren Familien.

In der Heilpädagogischen Kindertagesstätte ergänzen sich folgende Berufsgruppen aus pädagogischen und pflegerischen Bereichen zu den Teams der einzelnen Gruppen:

- HeilerziehungspflegerInnen
- Erzieherinnen
- Examierte Pflegekräfte
- Auszubildende in der Heilerziehungspflege

Ergänzt wird das Team durch die Therapeuten.

- Dipl. Psychologin
- Physiotherapeutin
- Dipl. Sprachbehindertenpädagogen

Wir betreuen Kinder mit unterschiedlichsten Behinderungs- und Krankheitsbildern. Der Therapiestuhl Hip- Hop konnte bzw. kann bei Kindern mit folgenden Krankheitsbildern erfolgreich eingesetzt werden:

- Cerebralparesen
- Hypotoniesyndrome unklarer Genese
- Unterschiedlichsten Syndromerkrankungen
- Kleinwüchsigen Patienten

Die Testung wurde von einer Physiotherapeutin betreut. Daran beteiligt waren die Erzieherinnen, sowie die pädagogischen Mitarbeiter der Gruppen, da diese den Stuhl im Alltag eingesetzt haben.

Funktionsfähigkeit

Der Therapiestuhl Hip Hop 100 zeichnet sich durch umfangreiche Verstellmöglichkeiten folgender Maße aus:

- Sitztiefe
- Sitzbreite
- Unterschenkellänge
- Rückenhöhe
- Sowie die Einstellung einzelner Zubehörteile (wie Thoraxpeltotten usw.)

Er kann durch eine Gasdruckfeder stufenlos in der Sitzhöhe angepasst werden. Die Höhe kann so zwischen 38 und 48 cm variiert werden.

Der Hip Hop 100 Therapiestuhl zeichnet sich durch ein großes Spektrum an Zubehörteilen aus. Hiermit können Kinder mit unterschiedlichsten Behinderungsbildern sinnvoll versorgt werden.

Medizinisch/ Therapeutischer Nutzen

Der Stuhl dient als Sitzmöglichkeit für die Kinder in unterschiedlichsten Alltagssituationen wie dem Spielen am Tisch, dem Essen, in Therapiestunden, als auch bei der Kommunikation mit anderen Kindern oder Erwachsenen. Der Stuhl ist sowohl für den Einsatz zu Hause, als auch als Schulstuhl bzw. in einer anderen Einrichtung geeignet.

Durch die stufenlose Höhenverstellung kann das Kind so immer auf die richtige „Augenhöhe“ des Kommunikationspartners gebracht werden.

Das umfangreiche Zubehör, was sehr individuell bzgl. der Größe und der Bedürfnisse der Kinder ausgesucht und eingestellt werden kann, ist sehr gut geeignet, um die Kinder in ihrer Sitzpositionierung zu unterstützen und so eine Prophylaxe vor Skelettdeformitäten gewährleisten zu können.

Eine Schaumzone im Tuberbereich ist mit zwei unterschiedlichen Pads aus Relaxschaum ausgestattet. Diese ermöglichen eine weichere aber auch bei Bedarf eine härtere Zone im Bereich der Sitzhöcker. Das dient einer möglichst physiologischen Sitzpositionierung. Die Möglichkeit einer Sitzkantelung sowie die Öffnung des Rückens stellen sicher, dass die Rückenmuskulatur des Kindes bei Bedarf entlastet werden kann. Bei fehlender oder schwacher Kopfkontrolle kann dies einer physiologischen Positionierung ebenfalls zuträglich sein.

Sicherheit

Der Stuhl ist insgesamt stabil und sicher konstruiert.

Der Hip Hop 100 hat vier leichtgängige, gummierte Räder, wobei die zwei hinteren Räder mit einer Handbremse vom Kind oder der Betreuungsperson fixiert werden können.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten unterschiedliche Gurte am Stuhl anzubringen. Diese dienen zwar überwiegend der Sitzpositionierung, verhindern aber gleichzeitig bei vielen Kindern auch ein Herausfallen.

Handling

Die stufenlose leichte Höhenverstellung des Sitzes kann beim Rein- und Raussetzen des Kindes bzw. beim Transfer helfen. Ein für die Betreuungsperson rückschonendes Arbeiten mit dem Kind ist somit leicht möglich. Außerdem kann so die Selbständigkeit beim Transfer verbessert werden.

Einzelne Einstellungen wie z.B. Fußstützenhöhe oder Armlehnenhöhe sind einfach über Handschrauben einzustellen. Das ist z.B. wichtig, wenn aus therapeutischen Gründen oder einfach um den Stuhl den alltäglichen Bedürfnissen anzupassen, eine schnelle Adaption erforderlich ist.

Der Bezug des Hip Hop ist aus einem pflegeleichten Mikrofasermaterial. Er ist schmutzabweisend und abwaschbar. Der Rückenbezug kann außerdem entfernt werden und in der Waschmaschine bei 30° gereinigt werden.


Fazit

Das Gesamtkonzept des Hip Hop 100 entspricht den Bedürfnissen von Kindern mit unterschiedlichsten Behinderungen, für die ein freies, selbständiges Sitzen nicht möglich ist. Es ermöglicht eine aktive Verbesserung des Haltungs- und Bewegungsmusters.

Unsere Patienten und auch deren Eltern haben den Stuhl insgesamt als sehr positiv bewertet.

Das gute Feedback resultierte aus Funktionalität aber auch aus optischen Gründen.

Der Stuhl bietet gute Mitwachsmöglichkeiten und ist so auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit eine sinnvolle Versorgung im Kinderbereich.

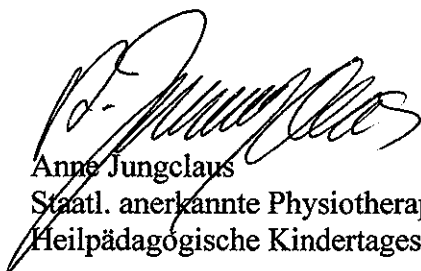

Anne Jungclaus
Staatl. anerkannte Physiotherapeutin
Heilpädagogische Kindertagesstätte

Selsingen, den 21.07.2008